


# Vidas



## Pensato per Durare

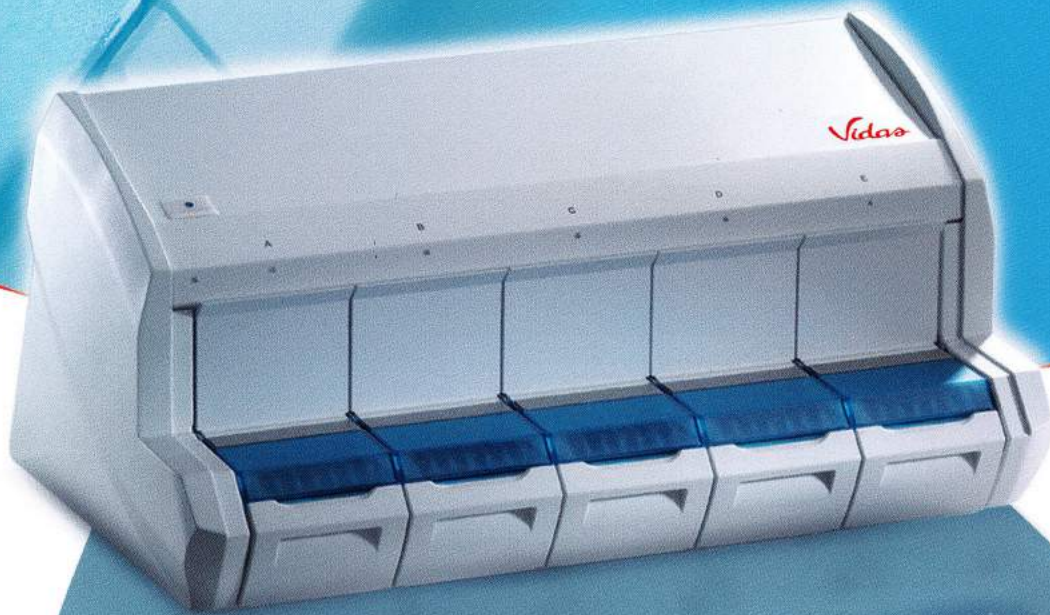

alla fonte della salute,  
il valore della diagnostica



# Vidas

# Pensato

VIDAS® è apprezzato in tutto il mondo. L'esperienza nel campo dell'analisi di laboratorio, ha permesso di progettare lo Strumento che risponde alle Vostre esigenze, ha un design unico.



## Valori Unici in un nuovo Design: VIDAS®, uno

### Un Nuovo Design che incrementa il Comfort d'Uso

Grazie alle Vostre indicazioni abbiamo, con il nuovo Design:

- **Migliorato il flusso di lavoro** ottimizzando il caricamento dei test
- **Incrementato la facilità** di inserimento e refertazione dei risultati

### I Valori di VIDAS

- Reagenti monotest, pronti all'uso (1 paziente = 1 test)
- Confezioni complete di calibratori e controlli
- Affidabilità strumentale (MTBF\* > 452 giorni)
- Stabilità delle calibrazioni (ogni 14 giorni)
- Identificazione automatizzata dei test tramite codici a barre
- Modalità operativa "Carica e vai"

### Flessibilità, dove e quando vuoi:

- Cinque compartimenti indipendenti da sei test ciascuno
- Esecuzione simultanea di parametri differenti
- Un ampio menu (più di 80 parametri in Immunochimica e Malattie Infettive)
- Confezionamento adatto a supportare differenti carichi di lavoro (30 o 60 test)

### Qualità

- Nessuna possibilità di contaminazioni crociate
- Test di riferimento: HIV DUO Ultra, D-Dimer Exclusion™, Toxo Avidity...
- Eccellenti CV (Coefficients di variazione) confermati in numerosi Programmi Esterni di CQ

#### Le misure di VIDAS:

58 cm (altezza)  
105 cm (lunghezza)  
68 cm (profondità)

#### Peso:

65 kg

#### Caratteristiche elettriche:

Voltaggio: 100-240 VAC  
Consumo: 3-1.2 A  
Frequenza: 50/60Hz  
Potenza: 280 VA massimo  
Emissioni di calore: appross.  
921 BTU/h




\* Intervallo medio d'intervento tecnico



# per Durare

o il Mondo per semplicità, flessibilità e accuratezza.  
l'immunoanalisi e la capacità di dare ascolto  
o consentito lo sviluppo del nuovo e innovativo

## Classe a parte

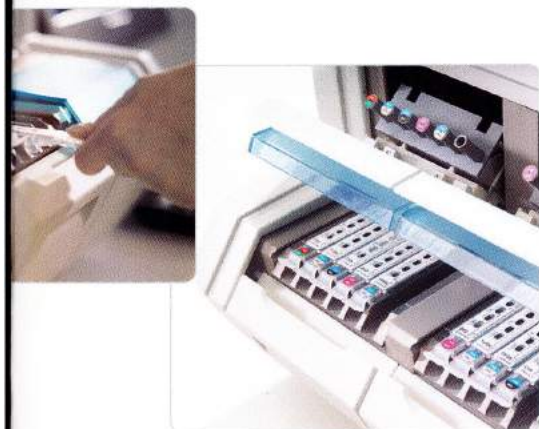

### La Semplicità che fa la differenza


VIDAS utilizza reagenti unitari e pronti all'uso

- 1• Il cono **SPR**<sup>®</sup> utilizzato come supporto della fase solida della reazione, è rivestito al suo interno da antigeni o anticorpi.
- 2• La **Cartuccia** contiene tutti i reagenti necessari alla reazione.

Il cono **SPR**<sup>®</sup> agisce come dispositivo di pipettamento

Durante ogni fase, il cono **SPR**<sup>®</sup> aspira e rilascia i reagenti. Questo concetto originale previene ogni possibile contaminazione tra reagenti e tra campioni. L'assenza di tubi, siringhe ed aghi, riduce al minimo le necessità di manutenzione.

VIDAS<sup>®</sup> si avvale della tecnologia **ELFA**, che completa la metodica ELISA con una lettura finale in fluorescenza blu, assicurando eccellenti risultati in termini di sensibilità e specificità.

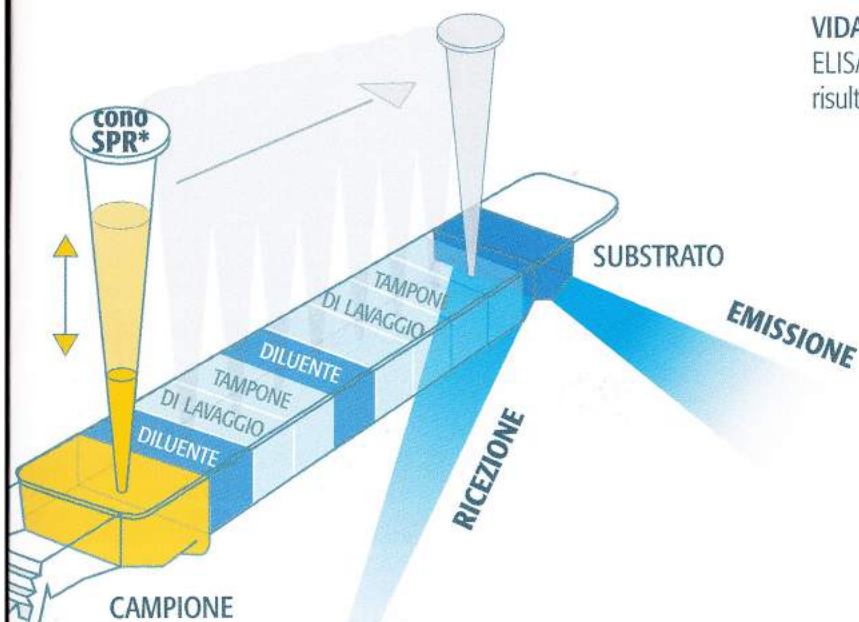

\* SPR: Solid Phase Receptacle



## VIDAS, Pensato per durare

**Semplice da usare:** Carica e avvia gli esami

**Affidabilità strumentale:** MTBF >700 giorni

**Costo-efficacia ineguagliabile:**

- Reattivi monotest
- Kit comprensivi di tutto il materiale occorrente per l'esecuzione dei test (curva memorizzata, calibratori, controlli, diluente, ecc.)
- Ridotta frequenza e ridotto numero di punti di calibrazioni e controlli
- Confezionamento da 30 o 60 test, associati a lunghe scadenze

Vidas: un sistema che si adatta alle più svariate esigenze organizzative del laboratorio

## VIDAS, la soluzione personalizzabile per i tuoi carichi di lavoro giornalieri

### TEST IN ROUTINE:

Pannelli completi: (Tiroide, Fertilità, Marcatori tumorali, TORC, EBV, EPATITI, HIV)

### TEST SPECIALISTICI E DI 2° LIVELLO:

Toxo Avidity, Cito Avidity, Lyme, C. Difficile Toxin A+B, C. Difficile GDH, Rotavirus Ag, HIV P24 Ag, H. Pylori IgG, anti-Tg, anti-TPO, von Willebrand Ag, Proteina C coag., Galectin-3

### TEST DI CONFERMA:

IgM TORC, EBV, anti-HCV, HBsAg, HIV1+2 Ag/Ab

### TEST IN URGENZA:

Procalcitonina, NT-proBNP, D-Dimero Exclusion, HCG, Digossina, Troponina I Ultra, Mioglobina, CK-MB massa

Possibilità di eseguire numerosi protocolli di lavoro all'interno della stessa seduta di lavoro

Strumento sempre pronto all'uso per l'esecuzione degli esami 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

# Vidas

bioMérieux Italia S.p.A.  
Via Di Campigliano, 58  
50012 Bagno a Ripoli (FI)  
Tel. : (39) 055 64497  
Fax : (39) 055 643025  
[www.biomerieux.it](http://www.biomerieux.it)  
[www.biomerieux.com](http://www.biomerieux.com)

