

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Metodo immunocromatografico




- **Nessun strumento**
 - **Nessuna estrazione di acidi nucleici**
- **Rilevazione diretta dell'antigene virale**
 - **Inclusi 2 tamponi: nasale + orale**
- **Risultati in 10-15 minuti**



Metodo immunocromatografico con doppio anticorpo "sandwich"

Se nel campione c'è presenza del virus SARS-CoV-2, la proteina nucleocapsidica è legata dall'anticorpo monoclonale marcato con oro colloidale e ad un secondo anticorpo monoclonale adeso nell'area test (T), formano un complesso che si manifesta con la comparsa di una linea rossa indicante che il test è positivo

PROCEDIMENTO

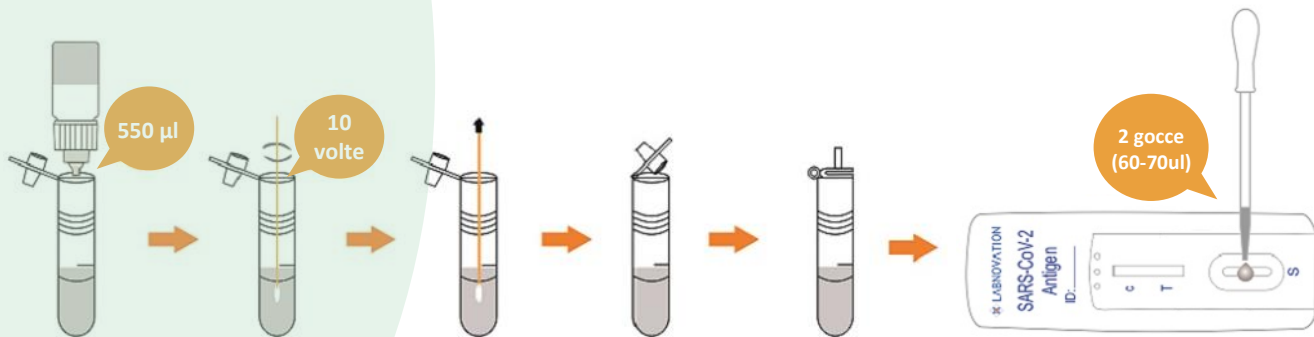

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

